




**SRB**

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Vaga Telesna 180kg



0.292.093

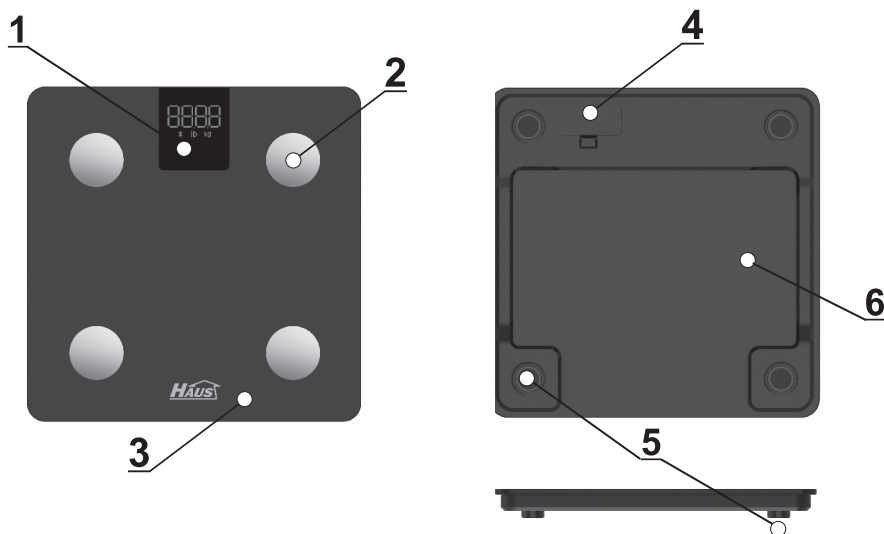

## Opis uređaja

1. LCD displej
2. Površine senzora visoke osetljivosti
3. Platforma od ojačanog stakla
4. Poklopac baterije
5. Nogice
6. Telo vage

## Tehnički podaci

Dimenzije: 280 x 280 x 28 mm  
 Težina: 1.2 kg  
 Opseg merenja: 0.2 - 180 kg  
 Napajanje: 2 x 1.5V AAA Baterije - idu uz uređaj

- Automatsko uključenje
- Automatsko isključenje

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

Pre početka korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu



Ovo uputstvo za upotrebu sadrži sve bitne podatke za bezbedno rukovanje uređajem, molimo Vas da ga pažljivo pročitate i da ga odložite na mesto na kojem će Vam uvek biti dostupno.

## Važne napomene

Ovaj proizvod koristi BIA (bioelektričnu impedansnu analizu). Da biste dobili tačne i dosledne rezultate merenja, koristite ga u isto vreme svakog dana i pod istim uslovima koliko god je to moguće, na primer svakog dana ujutru itd.

### Da biste dobili tačnije rezultate, izbegavajte merenja u sledećim uslovima:

- Tokom ili odmah nakon napornih vežbi
- Odmah nakon tuširanja, kupanja ili saune
- Nakon obilnog pijenja
- Tokom ili odmah nakon nadimanja
- Tokom groznice

Molimo vas da prvo budete bosi i stojite uspravno na vagi tokom merenja, nošenje čarapa ili prijavih stopala itd. direktno će uticati na tačnost merenja i rezultate. Jedinice za težinu mogu se direktno prebacivati sa funti (lb) na kilograme (kg) preko aplikacije za vagu, uključujući i jedinice za visinu.

## Uputstvo za upotrebu

- Uklonite zaštitu za bateriju koja se nalazi na poledini vage blizu ležišta za baterije
- Postavite vagu na suhu, ravnu površinu
- Stanite na vagu i sačekajte da se na ekranu pojavi vaša težina. Vaša težina će stojati na ekranu 10 sekundi
- Ako vam se pojavi greška na ekranu, sačekajte da se vaga automatski ugasi pa ponovite proces

## Mere predostrožnosti

- Čuvajte vagu čistu i suhu da bi se izbegla eventualna oštećenja i da se spreči klizanje po površini i mogući pad
- Nemojte ostavljati nikakav predmet na vagi kada nije u upotrebi
- Prilikom vaganja stanite na sredinu vage da sprečite eventualno „klackanje“ na vagi
- Izbalansirajte težinu ravnomerno na obe noge da izbegnete greške i da dobijete ispravnu težinu
- Površina vage je napravljena od ojačanog stakla ali može puknuti ako dođe do udarca. Izbegavajte ispuštanje predmeta na vagu i udaranje
- Za čišćenje vage koristite čistu i suhu krpu
- Mehanizam vage se može oštetiti ako dođe u dodir sa vodom
- Resetujte vagu na taj način da izvadite bateriju. Sačekajte 10 sekundi i zamenite baterije da bi ispravno resetovali vagu

## Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje



Označava rizik od povrede ili oštećenja alata.



Proizvod obeležen ovim simbolom ispunjava sve važeće propise EU



Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.



Ne bacati skupa sa kućnim otpadom

## Zaštita životne sredine




Ako uređaj iz nekog razloga, nakon duge upotrebe postane neupotrebljiv, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte na odgovarajuća mesta za reciklažu.

Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.


## Saveti za pravilno merenje

**Pravilno merenje težine:**

Postavite vagu ravno na tvrdi pod i resetujte je pre merenja, sačekajte da se vaga prikaže na 0,0 lb/kg nakon buđenja pre nego što počnete sa merenjem.

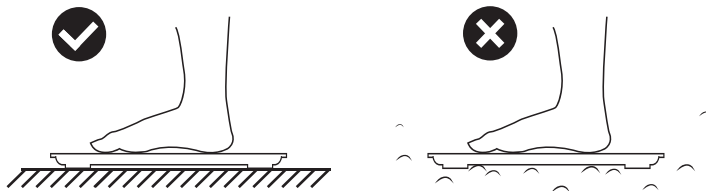**Pravilno merenje telesne masti i drugih parametara:**

Stanite uspravno na vagu i držite obe noge ravnomerno dodirivane elektrodama kao što je prikazano na slikama ispod.

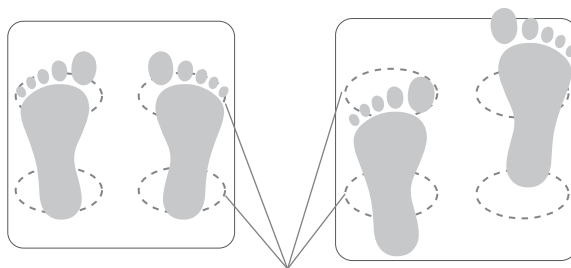

Površine senzora visoke osetljivosti

**Displej:** Instrukcije

|                                            |                                             |                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>136.0</p> <p>lb</p> <p>Normalan rad</p> | <p>No display</p> <p>Promenite bateriju</p> | <p>136.0</p> <p>lb</p> <p>Nema wireless signala</p> |
| <p>Lo</p> <p>Promenite baterije</p>        | <p>EEr/Err</p> <p>Preopterećenje</p>        | <p>CAL</p> <p>Kalibracija</p>                       |

## Upozorenje



- Ne koristite ako imate pejsmejker, veštačka pluća ili nosite EKG ili bilo koji drugi interni medicinski uređaj.
- Ne koristite ako ste trudni.
- Ne koristite na klizavom podu; ne koristite kada vam je telo mokro.
- Rezultati merenja telesnog sastava biće netačni ako koristite vagu odmah nakon teških fizičkih aktivnosti.
- Ova pametna vaga nije namenjena za upotrebu od strane dece mlađe od 18 godina.
- Ova pametna vaga ne sme se koristiti za dijagnostikovanje ili lečenje bilo kog medicinskog stanja.
- Uvek se konsultujte sa svojim lekarom ili medicinskim stručnjakom kako biste pronašli najbolja rešenja za vas.
- Izmene ili modifikacije mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

## Uključivanje vage i korišćenje aplikacije

Ova pametna vaga se isporučuje sa 2 AAA baterije. Molimo vas da instalirate baterije u odeljak za baterije i uključite vagu pre upotrebe.

Nakon uključivanja, možete meriti telesnu težinu. Ali da biste izmerili druge parametre sastava tela, kao što su telesna masnoća itd., prvo instalirajte aplikaciju za vagu na svoje mobilne uređaje da biste koristili vagu zajedno sa aplikacijom. Pogledajte korake u nastavku.

Ova pametna vaga za sastav tela može se bežično povezati sa mobilnim telefonima ili tabletima nakon što instalirate mobilne aplikacije. Molimo vas da prvo potražite i preuzmete aplikaciju „Feelfit“ u App Store-u ili Google Play-u i pažljivo pratite uputstva u nastavku:

### Korak 1: Downloadujte aplikaciju



Downloadujte "Feelfit" APP  
sa App Store ili Google Play



Registrujte se



Stavite baterije

### Korak 2: Uparite vagu sa mobilnim telefonom



Dodaj novi uređaj



Stanite na vagu



Uparite vagu  
sa aplikacijom

### Korak3: Izmerite i proverite vašu (BIA) - Analizu bioelektričnom impedansom\*



Ponovo stanite na vagu nakon što vaga prikaže 0,0 lb/kg, potom sedite sa vage dok se merenje ne završi



Proverite izveštaj u aplikaciji



Dva puta treptajući broj znači da je merenje težine završeno.

Broj 0 koji se stabilizuje znači da je merenje telesne masti završeno.

**\*BIA** (analiza bioelektrične impedanse) je metoda za merenje sastava tela, posebno procenata vode, masti i mišićne mase. Normalni rezultati zavise od pojedinca (pol, starost, fizička aktivnost) i specifične metode BIA. Uopšteno, osobe sa normalnom telesnom težinom treba da imaju veći procenat mišićne mase i manje procenat masti u odnosu na osobe sa prekomernom težinom.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VAGA TELESNA-180KG**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: \_\_\_\_\_, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj uređaj je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled vaganja većih težina od propisanih, izlaganje uređaja kiši, vlazi, kao i direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 50°C.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
3. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
4. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor napajanja gde je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**